BIOS living

DÉAMBULATEUR REPOSE-GENOU

KNR01

Comment utiliser un déambulateur repose-genou : étape par étape

Ajustement :

- **Repose-genou :** ajustez la hauteur afin que votre jambe blessée repose confortablement avec le genou plié à un angle de 90 degrés.
- **Poignées :** ajustez la hauteur afin que vos bras soient légèrement pliés au niveau des coudes lorsque vous tenez les poignées.

Montage du déambulateur repose-genou :

- Tenez-vous debout à côté du déambulateur repose-genou.
- Placez votre jambe blessée sur le repose-genou.
- Gardez votre jambe en santé au sol pour vous propulser et garder l'équilibre.

Équilibre :

- Tenez fermement les deux poignées.
- Gardez le dos droit et regardez devant vous; ne regardez pas vers le bas.

Mouvement vers l'avant :

- Poussez avec votre jambe en santé pour avancer.
- Utilisez les freins à main pour contrôler la vitesse ou vous arrêter. (Les freins sont activés en tirant vers vous.)

Tourner :

- Utilisez les poignées pour tourner.
- Afin d'éviter de basculer, effectuez des virages lents et contrôlés.

S'arrêter :

- Serrez doucement les freins à main.
- Pour vous garer, verrouillez les freins (en poussant les freins vers l'avant jusqu'à ce que vous entendiez un clic).



⚠ Conseils de sécurité

- Ne tentez pas de sauter ou de marcher avec les deux pieds.
- Utilisez le déambulateur repose-genou sur des surfaces lisses et planes (à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface bien pavée).
- Évitez les zones humides, inégales ou gravelées où le déambulateur repose-genou pourrait basculer.
- Ne roulez jamais trop vite et ne laissez jamais le déambulateur repose-genou rouler sans contrôle sur des pentes.
- Entraînez-vous dans un endroit sûr avant d'utiliser le déambulateur repose-pied en public.

Garantie

Le cadre du déambulateur repose-genou modèle KNR01 est couvert par une garantie limitée de 3 ans contre les défauts de fabrication et/ou de matériaux dans des conditions normales d'utilisation, et par une garantie d'un an sur le système de freinage, à l'exclusion de l'usure normale.

Cette garantie ne couvre pas les défaillances de l'appareil dues à une mauvaise utilisation, à de la négligence de la part du propriétaire ou à l'usure normale.

La garantie ne s'étend pas aux composants non durables, tels que les sacs, les roues et les poignées, qui sont soumis à une usure normale et qui doivent être remplacés périodiquement.

Cette garantie s'étend uniquement à l'acheteur d'origine et elle n'est pas transférable. Thermor Ltd ne garantit pas les pièces endommagées en raison d'une installation incorrecte, d'une modification et/ou d'une utilisation inappropriée. Il appartient à Thermor Ltd de déterminer la meilleure méthode de réparation/remplacement. La pièce remplacée ne sera remplacée qu'une seule fois dans le cadre de la garantie d'origine.

Si le produit devient inutilisable, veuillez le renvoyer avec tous ses composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous.

Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition ou de transport. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a fait l'objet d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'une manipulation brutale ou de dommages.

Expédiez l'appareil en port payé et assuré (au choix du propriétaire) à :


Thermor Ltd.
Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %

Paper
Papier

ÉTAPE 7 – INSTALLATION DU SAC

Assurez-vous que les trous sont bien alignés et faites glisser le sac pour le mettre en place.

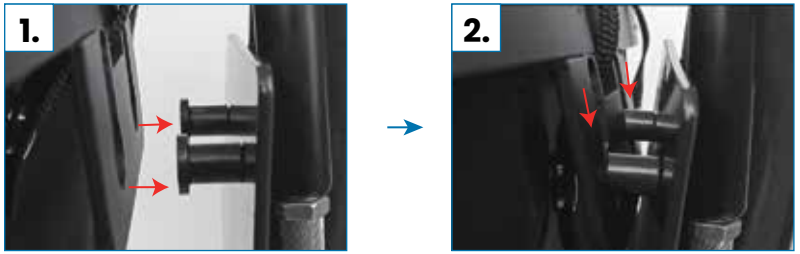





Entretien

1. Les surfaces extérieures de ce déambulateur repose-genou doivent être nettoyées régulièrement à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ni de produits chimiques caustiques.
2. Vérifiez régulièrement que les pièces ne sont pas desserrées, usées ou endommagées. Si vous constatez un problème, corrigez-le avant d'utiliser le déambulateur repose-genou.
3. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le déambulateur repose-genou pendant une longue période, rangez-le dans un endroit frais, sec et sûr.

BIOS living™

DÉAMBULATEUR REPOSE-GENOU

KNR01




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

LISTE DES PIÈCES


Bâti des roues arrière


Cadre principal



Repose-genou

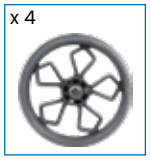

Roue


Sac



Levier de relevage

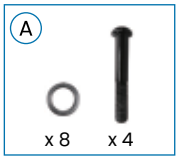


Vis de roues



Vis de connexion

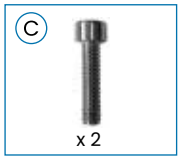

Vis de poignées

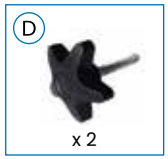


Vis en étoile


Clé Allen


ÉTAPE 1 – MONTAGE DU CADRE PRINCIPAL

Déployez le cadre principal et verrouillez le levier.
Si le cadre est instable, veuillez serrer la vis.

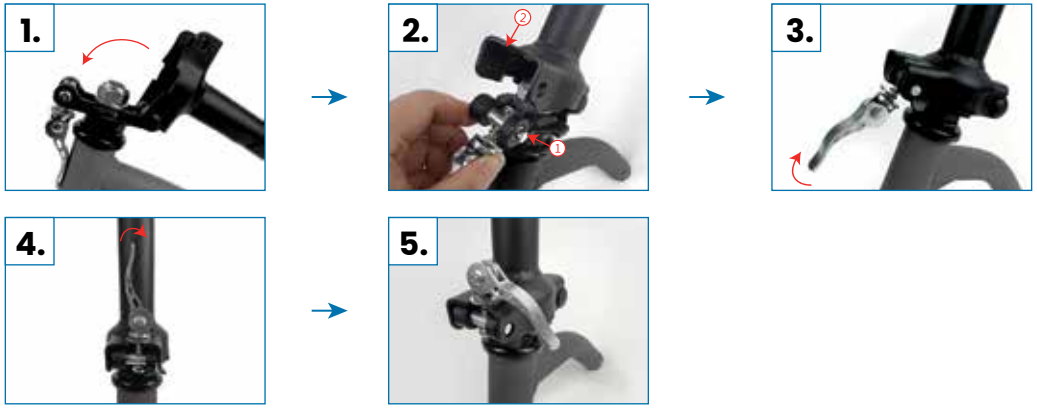


ÉTAPE 2 – INSTALLATION DES ROUES

Utilisez une clé Allen pour assembler les vis d'entretoise et les roues sur le bâti des roues arrière.

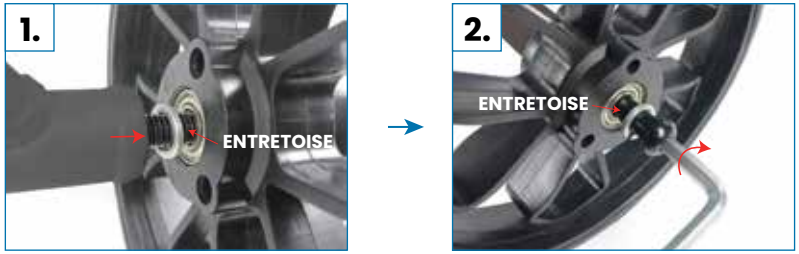


ÉTAPE 3 – INSTALLATION DU BÂTI DES ROUES ARRIÈRE

1. Insérez le bâti des roues arrière dans le cadre principal en vous assurant que les trous sont bien alignés.
2. Utilisez une clé Allen pour assembler les vis d'entretoise et les boulons aux joints.

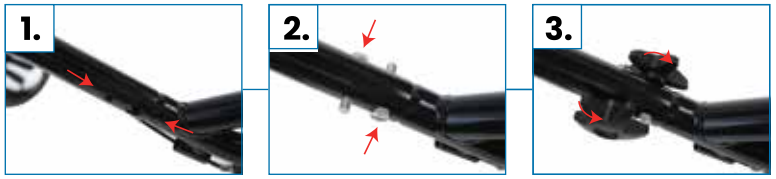


ÉTAPE 4 – INSTALLATION DU LEVIER DE RELEVAGE

1. Insérez le levier de relevage dans le cadre principal.
2. Ajustez l'assemblage à la hauteur voulue en vous assurant que les trous sont bien alignés.
3. Insérez la vis en étoile Ⓓ dans le trou et serrez-la.
4. Fixez l'attache de câble au cadre principal.

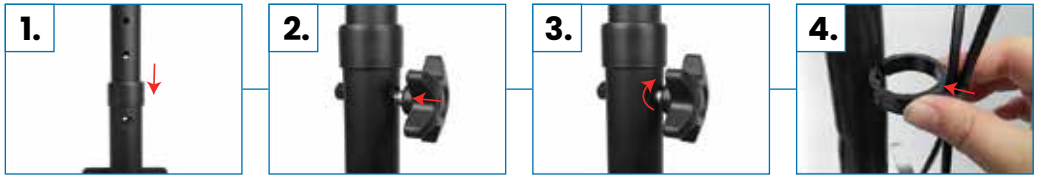

ÉTAPE 5 – INSTALLATION DES POIGNÉES

Placez les poignées sur le levier de relevage et fixez-les en place à l'aide des vis de poignées Ⓒ.

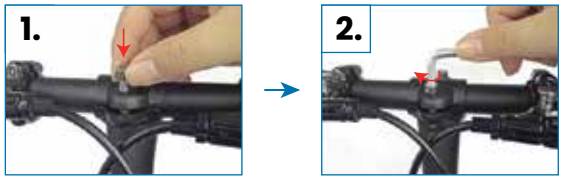

ÉTAPE 6 – INSTALLATION DU REPOSE-GENOU

1. Insérez le repose-genou dans le tube.
2. Ajustez le repose-genou à la hauteur voulue en s'assurant que les trous sont bien alignés.
3. Insérez la vis en étoile Ⓓ dans le trou et serrez-la.

