
BIOS living

Mode d'emploi — élévateur de siège de baignoire 59023

1. Ouvrez la boîte et suivez les directives ci-dessous.

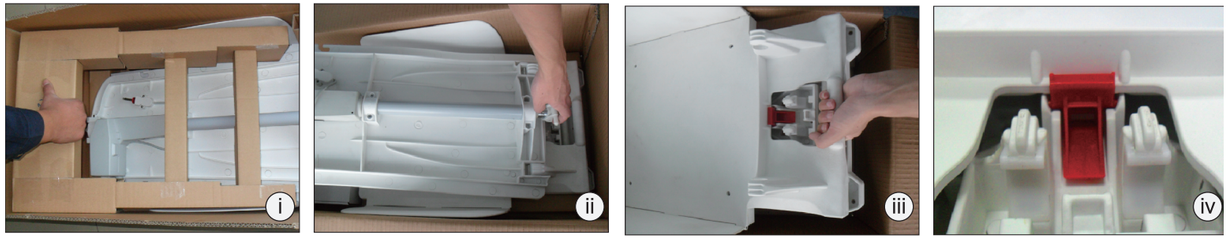


i. Retirez l'emballage et tout le contenu de la boîte.
ii. Soulevez l'extrémité avant du dossier et déplacez-le vers l'avant.
iii. Saisissez la poignée du siège pour soulever le fauteuil.
iv. Assurez-vous que la boucle rouge est en position verrouillée lors du déplacement.


2. Installez les ventouses antidérapantes sous la base

i. Les ventouses doivent être propres avant leur utilisation.
ii. La languette des ventouses doit être tournée vers l'arrière.
iii. Assurez-vous de placer les ventouses sur le bord de la baignoire.




3. Assemblez le siège au dossier

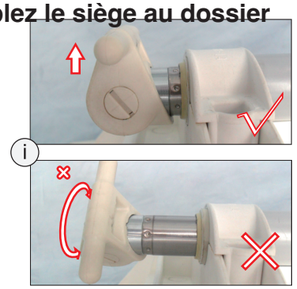

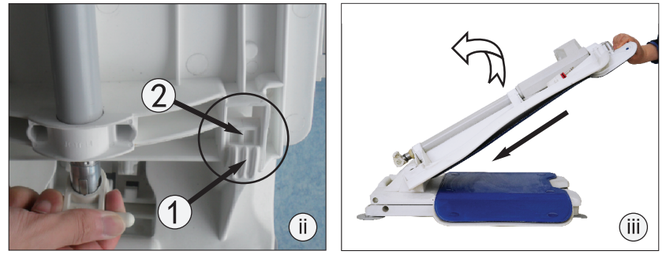

① Base de l'essieu ② Arbre de guidage

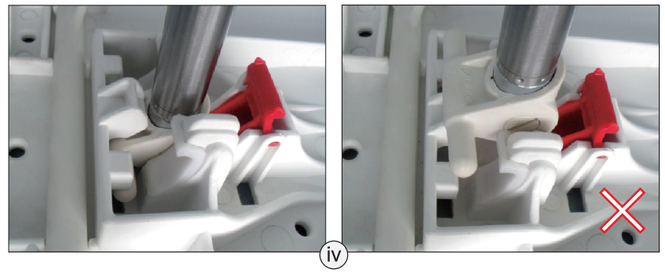



i. Avertissement : assurez-vous que la tige de poussée est complètement rétractée et orientée dans le bon sens.
ii. Le dossier glisse dans la base de l'essieu qui se trouve à l'extrémité du talon de la section du siège.
iii. Soulevez le dossier de 45 degrés jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la base de l'essieu. Poussez le dossier vers l'arrière jusqu'à ce qu'il atteigne la position la plus basse.
iv. Avertissement : assurez-vous que l'extrémité du talon de l'actionneur est correctement fixée à la base élévatrice de la baignoire. Sinon, il y a un risque de dommage.

4. Commande manuelle et pile rechargeable


Branchez la prise du chargeur ① au connecteur de la commande manuelle ②.

i. La pile se recharge en 8 heures.
ii. Avertissement : assurez-vous que le chargeur et la commande manuelle sont propres et secs avant la recharge.
iii. La commande manuelle peut être en contact avec l'eau lors de l'usage de l'élévateur de siège de baignoire.
iv. Avant de ranger l'appareil, assurez-vous de l'essuyer jusqu'à ce qu'il soit bien sec et rangez-le dans un endroit frais et sec.

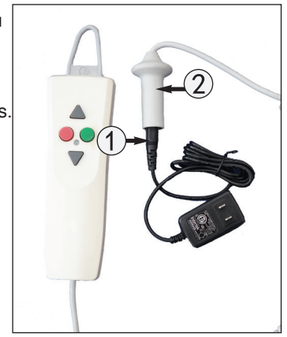

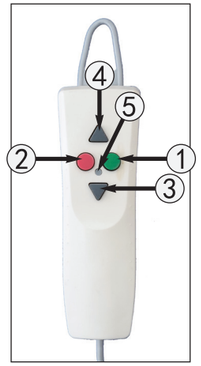


① Bouton de mise en marche
② Bouton d'arrêt d'urgence
③ Abaisser
④ Soulever
⑤ Indicateur d'alimentation

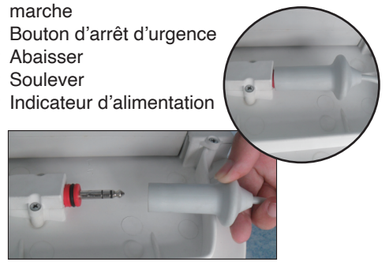

Branchez le connecteur de la commande manuelle au dossier. Assurez-vous que le fil est correctement fixé à la broche. Le connecteur doit être placé à l'endroit en rouge.


5. Installation ou enlèvement de l'élévateur de siège de baignoire


i. Placez la base de l'élévateur de siège dans la baignoire.
ii. Avertissement : le dossier ne doit pas cogner contre la baignoire. En cas de contact, le siège et la base doivent être réajustés.
iii. Le siège doit être élevé à une hauteur adéquate avant son utilisation.
iv. Pour retirer l'élévateur de bain, rétractez l'actionneur à la position la plus basse et poussez le dossier de 45 degrés vers l'avant. Vous pouvez ensuite retirer l'appareil.
v. Tirez sur chaque ventouse individuellement à l'extrémité du talon pour la dégager.
vi. Remarque : essuyez l'élévateur de siège de baignoire après l'utilisation et rangez-le dans un endroit frais et sec.

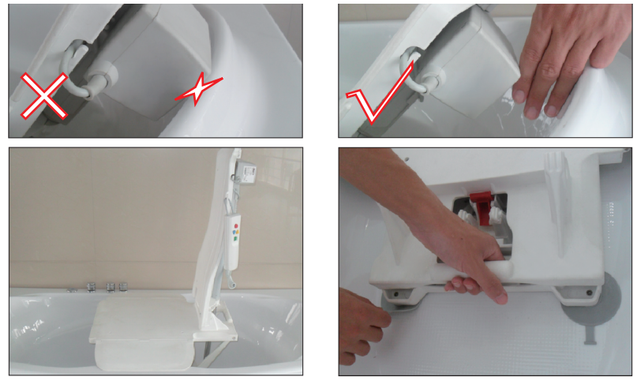

6. Utilisation du siège coulissant

i. Assoyez-vous sur le siège souple.
ii. Faites tourner le siège souple et placez vos jambes dans la baignoire.
iii. Faites glisser le siège jusqu'à ce qu'il soit en position centrale.

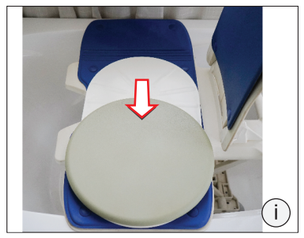

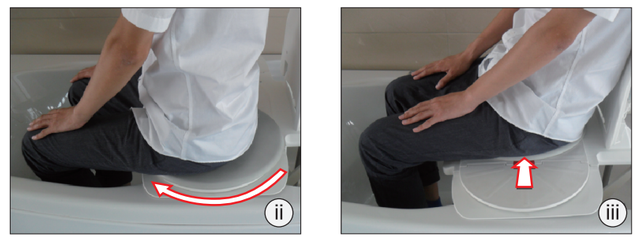

Spécifications :

Poids (incluant la commande manuelle) : 27,55 lb (12,5 kg), capacité maximale : 300 lb (130 kg), tension de fonctionnement : 12 V, classe d'étanchéité : IPX7, entrée de l'adaptateur secteur : 100 à 240 V CA

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Veuillez contacter notre service à la clientèle pour obtenir plus d'information.

Téléphone : 1 866 517-2970
Courriel : support@biosmedical.com

Paper Papier

FSC www.fsc.org FPO

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM