Graphic's Department
graphics@thermor-ins.com

This artwork and design are the property of Thermor Ltd. and are intended solely for the production of authorized products. Reproduction, distribution, or use without written consent is strictly prohibited.

PROJECT DETAILS

Project Type	Customer	Model Number	Designer	Colour Breakdown
Instructions	Thermor Ltd	LF766	Alex Vranjesevic	CMYK
Date Modified	Job Number	UPC - Barcode	Revision	
December 2 2025	TH6859	0 57475 26766 7	D	

DO NOT PRINT (Cut) DO NOT PRINT (Crease)


BIOS living™
Transfer Bench



LF766
User's Manual


Weight Capacity 300 lbs/136kg


1 Check all parts

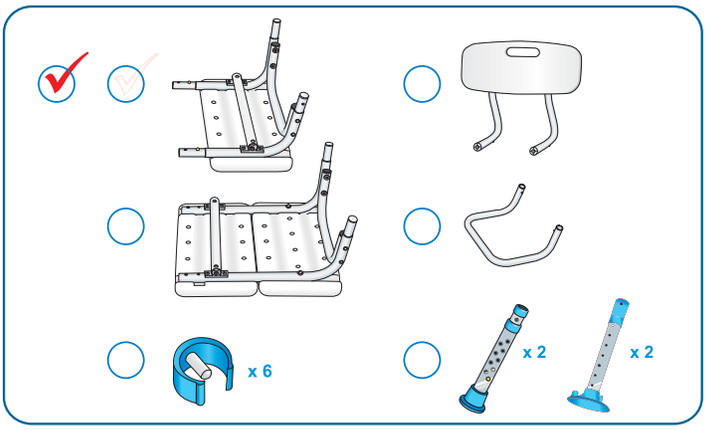



2 Tool-free setup


To make instructions easier to follow, colours are used for contrast and do not reflect the colour of the product.

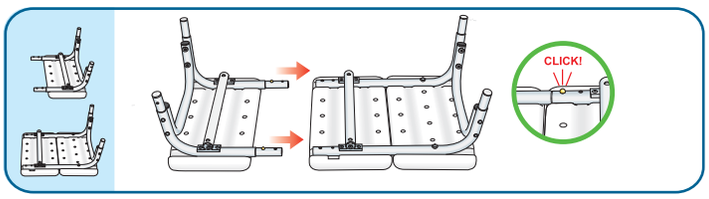

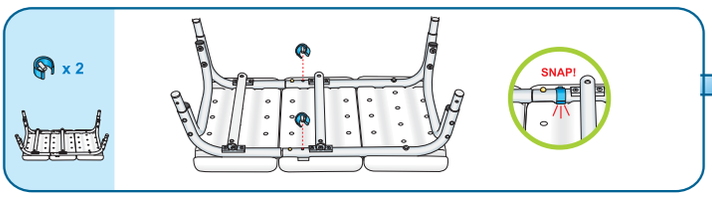

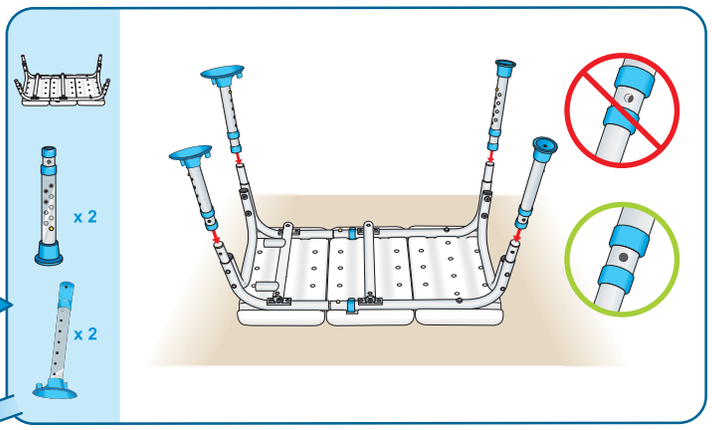

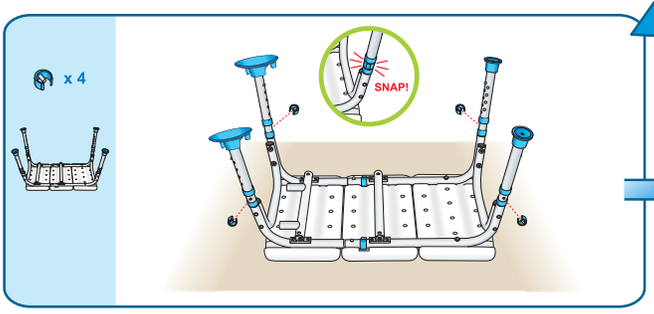

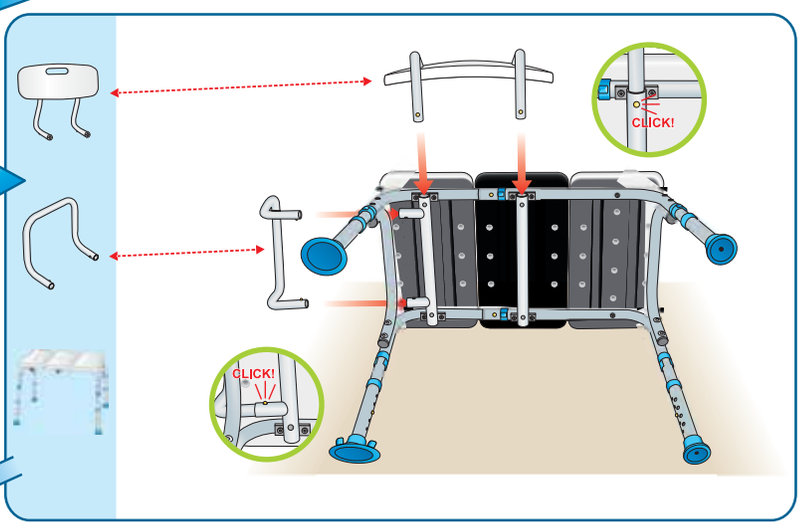



MAINTENANCE

1. Use a mild soap and water solution, rinse with clear water, then dry with a soft cloth. Ensure that the bench is well rinsed before using.
2. Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the bench.
3. Check fit and tightness of all nuts, bolts, and knobs weekly to ensure that the bench is safe to use.

SAFETY PRECAUTIONS

DO NOT ATTEMPT TO ADJUST OR OPERATE TRANSFER BENCH WITHOUT READING ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY.

- Make certain that the height adjustment snap buttons fully protrude through the same respective holes of each leg extension. This will ensure that the leg extensions are securely locked in position and an even height is achieved.
- **DO NOT** stand on transfer bench.
- BIOS Medical assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly, or use of this product.

Warranty

Three Year Warranty

This Transfer Bench has a one year warranty to be free of manufacturing defects in materials and workmanship under normal applications for the lifetime of the original owner. If this product becomes inoperable due to defect, return the product with all component pieces and proof of purchase to the address listed below. This warranty does not cover any shipping/transport costs. This warranty does not apply if the product is subject to misuse, neglect, rough handling, or damage.

Ship the unit prepaid and insured (at owner's option) to:

Thermor Ltd.
Attn: Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1

www.biosmedical.com
Email: support@biosmedical.com

FSC www.fsc.org FPO

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %

BIOS living


Tabouret de transfert



LF766
Mode d'emploi


Capacité maximale : 300 lb/136 kg


1 Vérifiez toutes les pièces

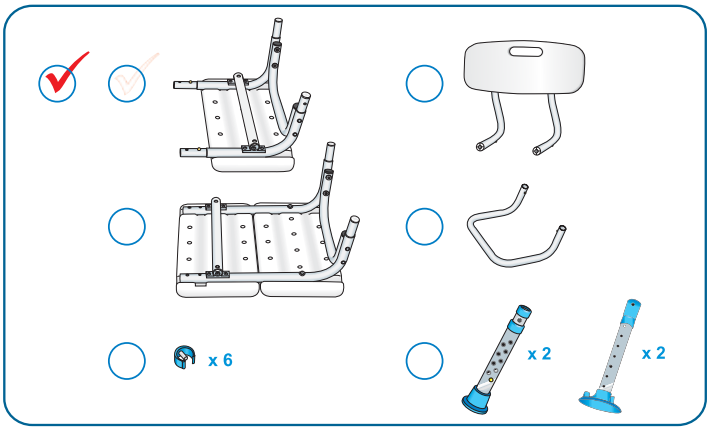



2 Assemblage sans outils


Pour faciliter la compréhension des instructions, des couleurs sont utilisées pour créer du contraste et ne reflètent pas la couleur du produit.

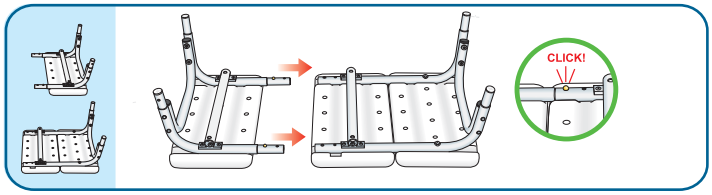

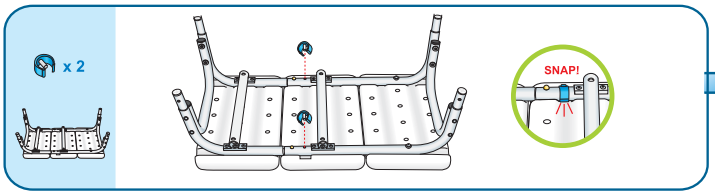

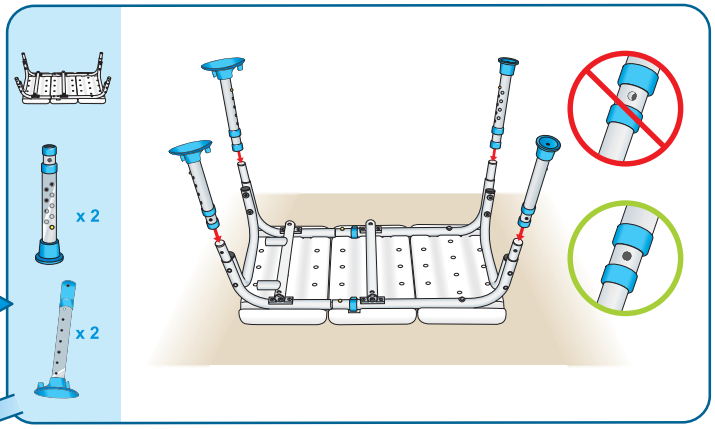

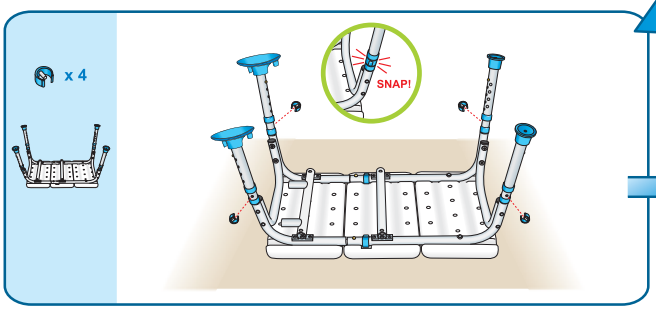

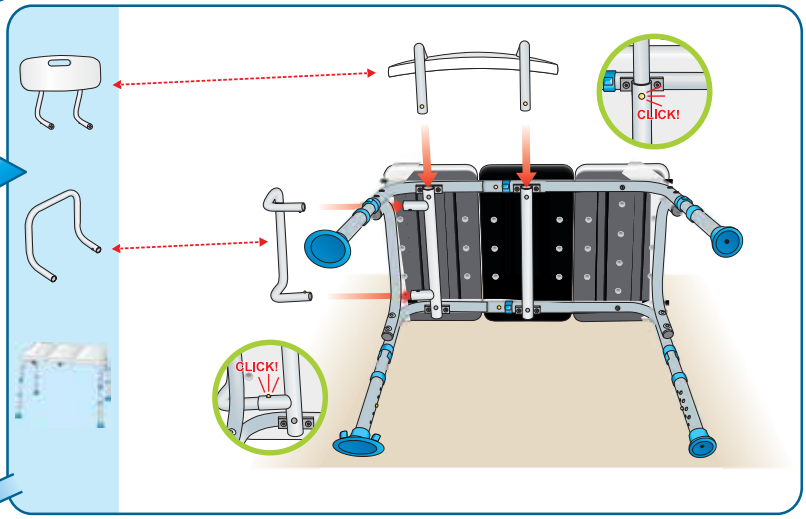



ENTRETIEN

1. Utilisez une solution d'eau et de savon doux. Rincez à l'eau claire, puis séchez avec un chiffon doux. Assurez-vous que le tabouret est bien rincé avant de l'utiliser.
2. N'utilisez pas de solvants organiques, de nettoyants abrasifs ou de tampons à récurer pour nettoyer toute partie du tabouret.
3. Vérifiez que tous les écrous, boulons et boutons sont bien serrés une fois par semaine pour vous assurer que le tabouret peut être utilisé en toute sécurité.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

NE TENTEZ PAS D'AJUSTER OU D'UTILISER LE TABOURET DE TRANSFERT SANS LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS.

- Assurez-vous que les boutons-pression de réglage de la hauteur font saillie complètement des orifices respectifs de toutes les rallonges de pattes, ceci afin de garantir que les rallonges de pattes sont solidement fixées en place à une hauteur constante.
- **NE MONTEZ PAS** sur le tabouret de transfert.
- BIOS Medical n'assume aucune responsabilité pour toute blessure ou tout dommage causé par l'installation, l'assemblage ou l'utilisation inappropriée de ce produit.

Garantie

Garantie de trois ans

Ce tabouret de transfert est garanti pour un an contre tout défaut de fabrication pour les matériaux et la main-d'œuvre dans le cadre d'une utilisation normale pendant la vie du propriétaire initial. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut, renvoyez-le avec tous ses composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/de transport. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été soumis à une mauvaise utilisation, à de la négligence, à une manipulation brutale ou à des dommages.

Expédiez le produit, prépayé et assuré (au gré du propriétaire) à :

Thermor Ltd.
Attn: Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1

www.biosmedical.com
Courriel: support@biosmedical.com

FSC www.fsc.org FPO

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %