BIOS living

CADRE DE SÉCURITÉ POUR LA TOILETTE
LF758
MODE D'EMPLOI

- Fabrication en acier robuste offrant un support stable
- Largeur réglable : 19 po à 22 po/48,25 cm à 55,88 cm
- Capacité de poids : 300 lb/136 kg

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

Étape 1. Assemblez les accoudoirs en les faisant glisser dans les tubes portant les numéros correspondants. Utilisez les attaches en C pour les sécuriser **(Figure 1)**.

Étape 2. Faites glisser les accoudoirs assemblés dans le support qui doit être fixé aux toilettes en utilisant les trous de goupille pour ajuster la largeur. Assurez-vous que les goupilles sont complètement et correctement vissées **(Figure 2)**.

Étape 3. Retirez le siège de la toilette existante et conservez les boulons pour le rattacher **(Figure 3)**.

Étape 4. Placez le cadre assemblé sur la toilette. Placez le siège de toilette sur le dessus et fixez-le avec les boulons **(Figure 4)**.

Étape 5. Placez les embouts en caoutchouc sous le siège de la toilette. Le poids de l'utilisateur maintiendra le rail de toilettes en place **(Figure 5)**.

ATTENTION : Cet appareil doit être utilisé comme cadre de sécurité uniquement. Il n'est pas conçu pour supporter tout le poids de l'individu. Vérifiez régulièrement les vis du cadre pour vous assurer que le rail est correctement fixé. Resserrez si nécessaire.

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Appel sans frais : 1-800-387-8520

Figure 1

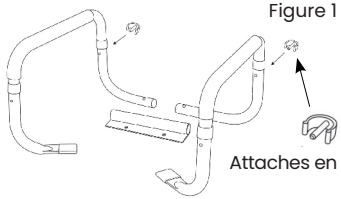


Figure 2

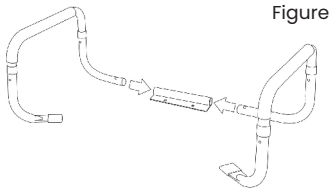


Figure 3

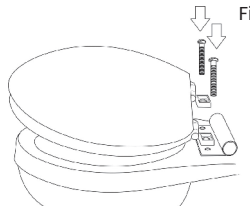


Figure 4


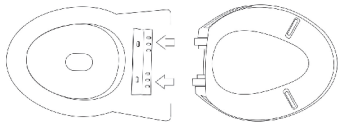


Figure 5

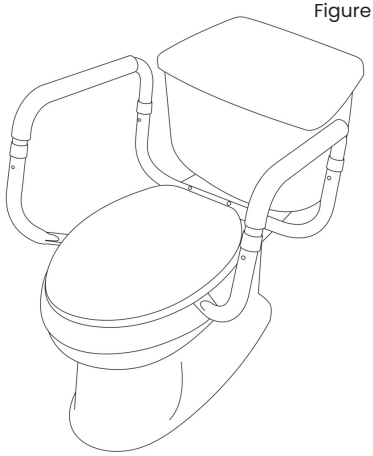

Paper

Papier

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %