
BIOS living

ACCOUDOIR POUR BANC DE BAIGNOIRE ET DE DOUCHE 95001

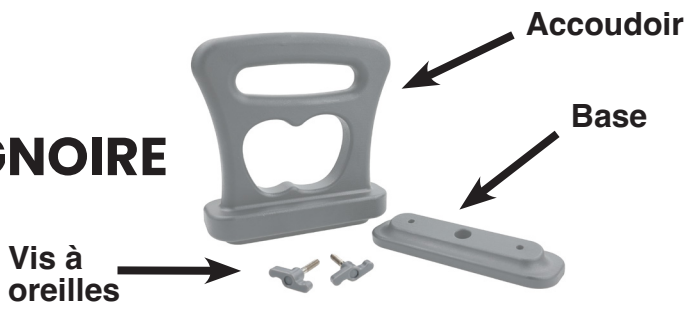

Conçu exclusivement pour les bancs de BIOS Living
59001 / 59002

Merci de vous être procuré l'accoudoir BIOS Living.
Ce produit utilise un concept ergonomique pour un accoudoir confortable et stable qui vous aide à garder l'équilibre lorsque vous vous levez ou vous vous asseyez sur votre banc de baignoire/douche.

Suivez ces étapes simples pour fixer solidement votre accoudoir à votre siège de baignoire ou de douche BIOS Living.

1. Retirez le contenu de la boîte.

   Vous remarquerez que l'accoudoir et la base sont inclinés. Il y a un côté épais de 2 cm et un côté étroit de 1 cm.



2. Insérez l'accoudoir avec le côté épais face à l'intérieur de votre siège de baignoire. Il s'alignera ainsi avec la courbe de votre siège de baignoire.



3. Placez la base sur le dessous du siège de baignoire/douche avec le côté épais face à l'intérieur du siège.

4. Tout en maintenant la base en place, insérez la première vis et serrez-la jusqu'à ce qu'elle tienne bien en place. Insérez ensuite la deuxième vis. Serrez les deux vis jusqu'à ce qu'elles soient complètement fixées en place.



ATTENTION

Cet accoudoir est destiné à servir d'appui et d'assistance; il n'est pas conçu pour supporter tout le poids d'une personne.
NE PAS mettre tout votre poids sur l'ACCOUDOIR lorsque vous vous levez ou vous vous asseyez, car votre siège de baignoire pourrait devenir instable et basculer.

GARANTIE D'UN AN

L'accoudoir pour banc est garanti un an contre tout défaut de fabrication, de matériaux et de main-d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation pour le propriétaire d'origine. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut, retournez-le avec tous ses composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/transport. Cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou si le produit a été assujetti à une mauvaise utilisation, à de la négligence, à une manipulation brutale ou à des dommages.

Expédiez le produit en port payé et assuré (au choix du propriétaire) à :
Thermor Ltd.
Attn : Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1

www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com

Paper
Papier

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %