
iWALK3.0

Guide d'Utilisation

Version Online (Français)

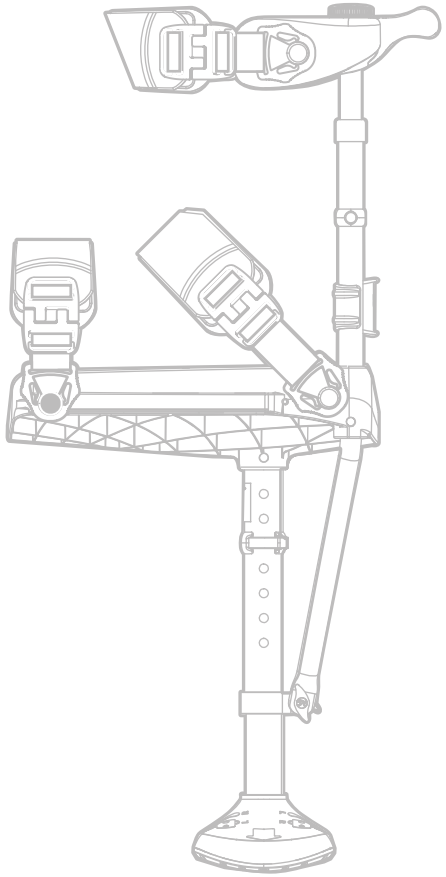

IWF10450 revC

iwalk-free.com/start

Visitez notre site pour visionner des vidéos pédagogiques.

1 ASSEMBLÉ
Rapide et sans outil

2 ADAPTÉ
Conçu sur mesure pour votre jambe


3 PREMIERS PAS
Apprenez à marcher avec iWALK3.0

Les instructions écrites ne couvrent que les notions de base. Le meilleur moyen d'apprendre est de suivre nos tutoriels vidéo.


1 ASSEMBLÉ
Rapide et sans outil


1 Installer le Tube Inférieur dans la Plateforme pour Genoux

A Déballez toutes les pièces.

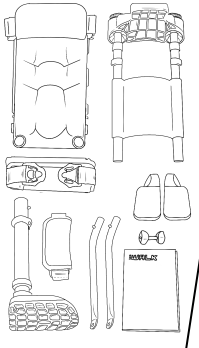


B Retirez la sangle de mollet située à l'arrière de la plateforme pour genoux.

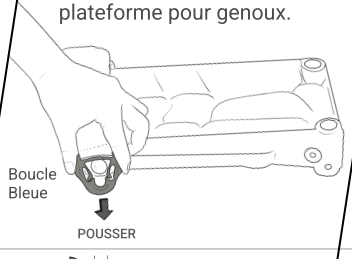


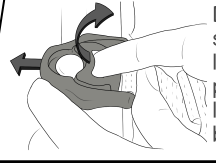

De l'autre côté, soulevez la languette et poussez pour libérer la boucle noire.

C Enfoncez l'ensemble du tube inférieur dans son logement situé sous la plateforme pour genoux.

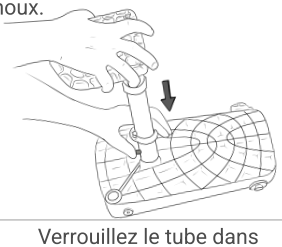


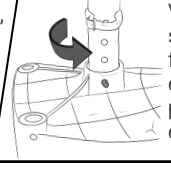


Verrouillez le tube dans son logement en le faisant tourner jusqu'à ce que le ressort du bouton-poussoir s'enclenche dans le trou.


2 Installer les Supports de Cuisse

A 1. Retirez les deux vis moletées bleues.

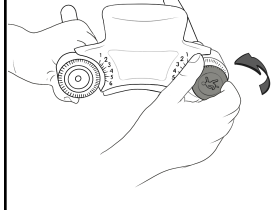

2. Installer les supports de cuisse gauche et droit.

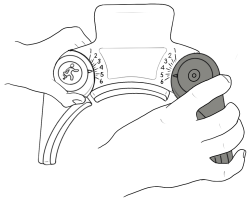

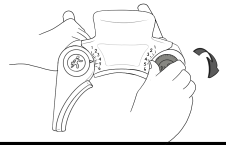


3. Réinstallez les vis moletées et serrez-les à seulement **50%**.

B Soulevez et faites pivoter le support de cuisse jusqu'à ce que l'indicateur soit sur le réglage **numéro 6**.




Si vous ne parvenez pas à faire tourner la vis, desserrez la vis moletée.

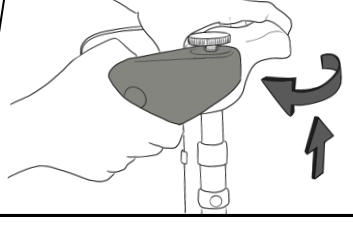


3 Installer L'ensemble de Béquille Supérieure dans la Plateforme du Genou

A Installez les tubes dans les douilles situées à l'avant de la plateforme pour genoux.

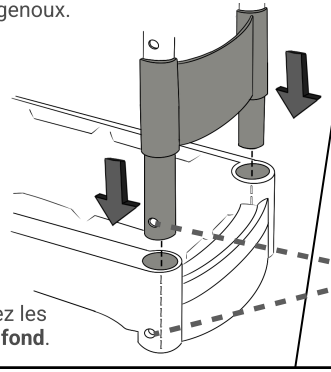


Enfoncez les tubes **à fond**.

B Le trou à l'extrémité des tubes doit être aligné avec le trou sur le côté de l'emboîture de la plateforme pour le genou.

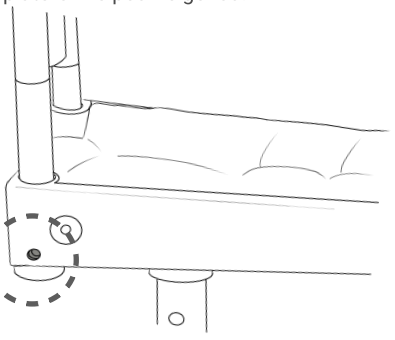


4 Installer les Tubes de Support (Gauche et Droite)

A Identifiez les tubes de support droit et gauche grâce au « **R** » ou « **L** » en relief sur le dessus du tube.

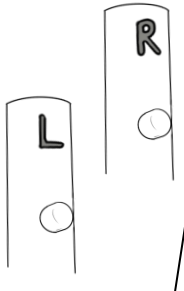


B Insérez le tube de support droit dans l'orifice situé en bas à droite de la plateforme pour le genou. Insérez-le jusqu'à ce que la tête du ressort sorte de l'orifice sur le côté de la plateforme pour le genou.

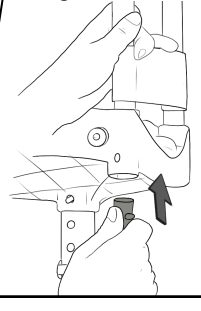

Répétez l'opération pour le tube de support gauche.


C Les trous situés au bas des tubes de support doivent être alignés avec les trous de la pince.

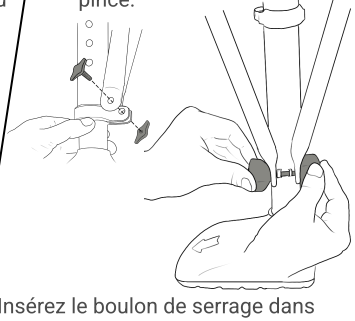


Insérez le boulon de serrage dans les trous, puis installez et serrez partiellement l'écrou de serrage.

5 Ajuster le Pied pour une Utilisation sur la Jambe Gauche ou Droite


A Une flèche est imprimée sur le dessus du pied. Pour une utilisation avec la jambe droite, la flèche doit pointer vers la droite. Pour une utilisation avec la jambe gauche, la flèche doit pointer vers la gauche.

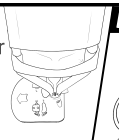


Exemple avec une béquille sur la jambe droite :

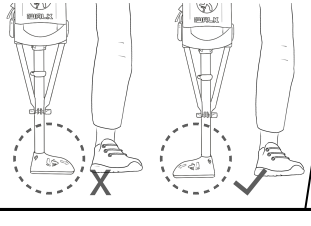


B 1. Pour modifier l'orientation du pied, retirez le clip de réglage de hauteur inférieur bleu.

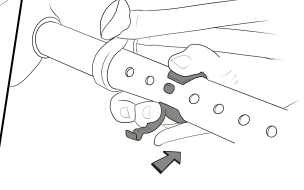

2. Faites pivoter le pied et le tube du pied de 180 degrés.

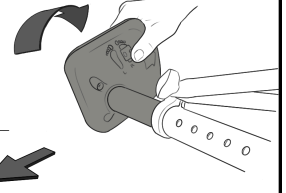

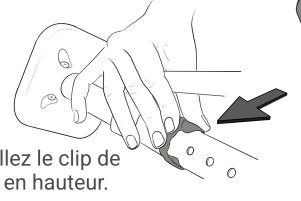

3. Réinstallez le clip de réglage en hauteur.

Regardez nos vidéos pour

ESSAYAGE ET PREMIERS PAS

iwalk-free.com/start

POURQUOI DOIS-JE REGARDER DES INSTRUCTIONS VIDÉO?

L'adaptation et l'apprentissage de l'utilisation d'iWALK lors de la première utilisation nécessitent un processus hautement personnalisé. Les instructions vidéo vous fournissent les informations sur mesure dont vous avez besoin pour une prise en main rapide et sécurisée, grâce à des détails bien plus précis que ceux contenus dans des instructions écrites.


2 *ADAPTÉ*

Conçu sur mesure pour votre jambe

Les bases - regardez des vidéos pour des instructions personnalisées


Réglage de la hauteur du bas des jambes

Utilisé pour obtenir une longueur de jambe égale

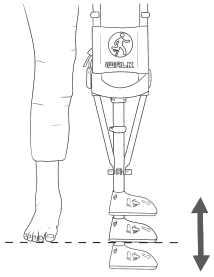

Réglage de la hauteur du haut des jambes


Utilisés pour stabiliser la béquille, les supports de cuisse sont placés le plus haut possible sur la cuisse.

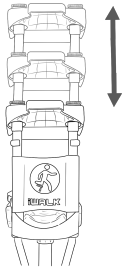

Ajustement du support de cuisse

Utilisé pour :


1. Adapter la taille de votre cuisse supérieure
2. Ajuster l'angle vertical pour les conditions de jambe Valgus / Varus pour s'adapter à votre cuisse supérieure.

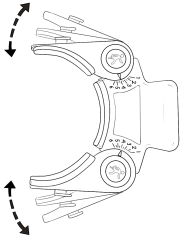

Ajustement de la sangle

Utilisé pour :

1. Ajuster la longueur de la sangle (partie noire)
2. Serrer la sangle une dernière fois avant utilisation, la desserrer pour la retirer

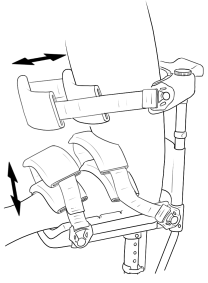

3 *PREMIERS PAS*

Apprenez à marcher avec iWALK3.0


Les bases - regardez des vidéos pour des instructions personnalisées

Portez des vêtements appropriés :

1. Pantalon ajusté
2. Chaussures confortables à semelles plates ou pieds nus (pas de sandales)

Se trouver dans un environnement approprié :

1. Surface dure et plane (pas de moquette)
2. Chemin permettant de faire au moins 10 pas sans s'arrêter ni faire demi-tour
3. Aucun obstacle sur le chemin
4. Rambarde, comptoir ou mur pour vous aider à garder l'équilibre

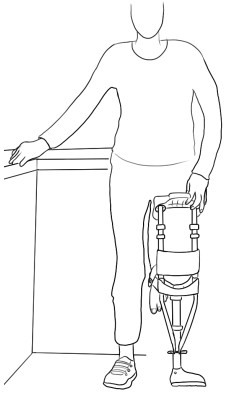

Apprendre à marcher :

1. Effectuez les exercices pratiques indiqués dans la vidéo.
2. Utilisez la poignée pour vos premiers pas.
3. Une fois que vous commencez à marcher, continuez, sans vous arrêter.

N'ABANDONNEZ PAS !

Certaines personnes s'adaptent rapidement, d'autres mettent plus de temps. Accordez-vous tout le temps nécessaire.

Si vous avez besoin d'aide, un soutien personnalisé est disponible.

AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE OU D'UN RETOUR ?

Des difficultés de montage ?

Pièces manquantes ?


Des problèmes d'adaptation ?

CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE D'ASSISTANCE

support@iwalk.com

iwalk-free.com/support

Veuillez vous référer à ce schéma lorsque vous contactez l'assistance iWALK.

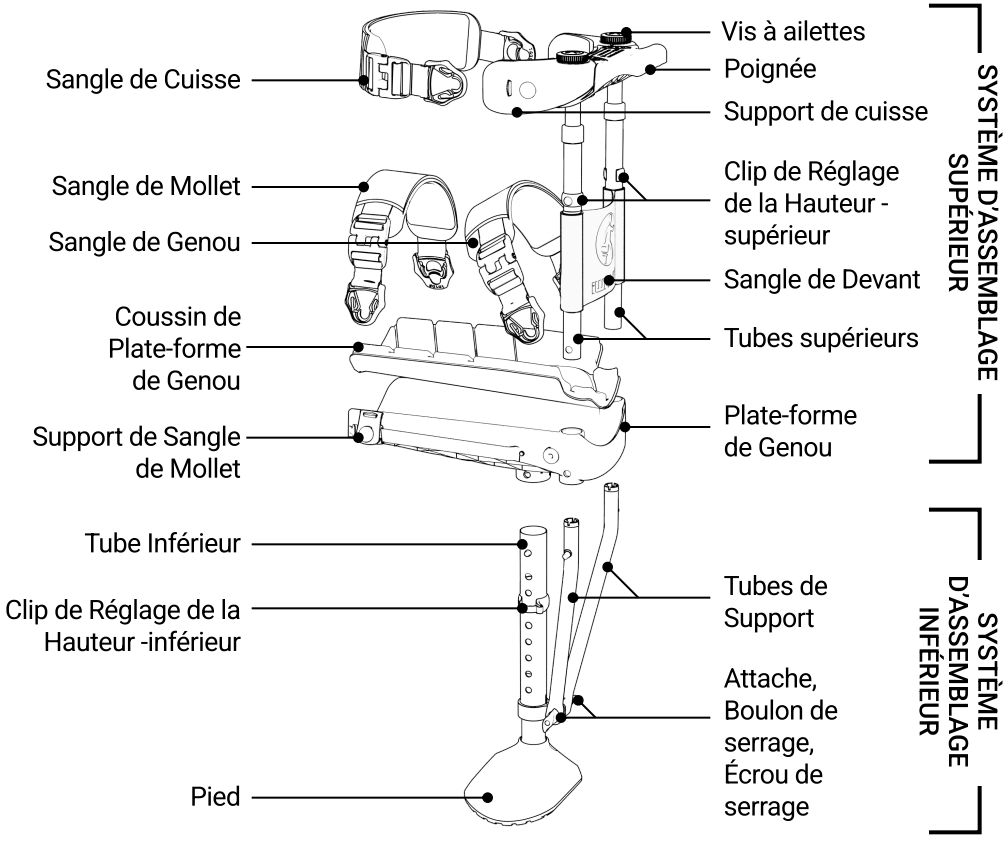

À PROPOS D'iWALKFREE

Notre mission est d'améliorer la vie des gens en leur offrant une autonomie fonctionnelle pendant leur période de convalescence sans appui.

iWALKFree est une petite entreprise avec une grande ambition : révolutionner la perception des personnes à mobilité réduite. Les béquilles et les scooters sont tellement contraignants ! Désormais, grâce à la béquille iWALK, vous pouvez avoir les mains libres.

Notre équipe, basée en Californie, est passionnée par son travail. iWALKFree est à l'origine de la béquille mains libres et reste le leader mondial. C'est notre unique priorité : nous nous consacrons entièrement à cette activité.

Nous sommes fiers de contribuer à votre rétablissement.

Informations Réglementaires et de Conformité

Informations Générales

- Utilisation prévue : Ce dispositif est destiné à une personne valide pesant moins de 126 kg, ayant besoin de soulager un membre inférieur lors de la marche, sans utiliser simultanément d'autres aides à la marche (canne ou béquille), dans des conditions ambiantes normales, en intérieur comme en extérieur, entre 0 °C et 40 °C.
- Durée de vie estimée : 150 jours à raison de 6 000 pas par jour pour l'utilisateur le plus lourd ; une durée de vie plus longue est prévue pour les utilisateurs plus légers.
- Instructions de nettoyage : Rincer à l'eau claire, puis laisser sécher complètement.

Restrictions D'utilisation

- Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé sans surveillance par des patients présentant des troubles importants de l'équilibre ou des difficultés cognitives.
- Les utilisateurs présentant des troubles cognitifs doivent se faire aider par une personne qualifiée pour utiliser le dispositif.
- Utiliser le dispositif uniquement après un assemblage correct, conformément aux instructions, par un personnel qualifié.
- Si vous ne comprenez pas ces instructions, arrêtez l'utilisation et demandez l'aide d'un professionnel qualifié.
- Ce dispositif est destiné à un usage individuel uniquement et ne peut être loué ni revendu.

Inflammabilité et Exposition à la Chaleur

- Cet appareil ne contient aucun matériau auto-extinguible ni ignifuge.
- Ne pas exposer à des sources de chaleur ambiante ou à une flamme nue.
- Ne pas entreposer ni laisser en plein soleil. Ne pas utiliser si l'appareil est brûlant au toucher avant qu'il n'ait refroidi.

Consignes de Sécurité et Précautions

- Ne placez pas vos doigts ni vos petites parties du corps dans ou près des trous ou des ouvertures en forme de V, que l'appareil soit en marche ou à l'arrêt.
- N'ingérez aucun composant de l'appareil. Ne pas assembler ni désassembler l'appareil en présence de jeunes enfants.
- Cessez l'utilisation en cas de lésions des tissus mous liées à l'utilisation ou au port de l'appareil.

Divers

- L'appareil ne répond pas aux commandes verbales ou télépathiques.
- L'appareil ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur. Suivez les instructions de montage d'origine lors du remplacement d'une pièce.
- L'appareil contient des composants métalliques. NE PAS PORTER NI UTILISER pendant un examen d'imagerie médicale, quel qu'il soit, y compris une IRM.

iWALKFree Inc.
130 North Marina Drive
Long Beach, CA, 90803 USA

CE

iWALK FREE

EC REP
IWF10450 revM
cepartner4U
Esdoornlaan 13, 3951
DB Maarn, The Netherlands